

Nagle zatrzymanie krążenia może przydarzyć się każdemu.

LifePad® może zapewnić natychmiastową pomoc

Jeśli po zatrzymaniu krążenia nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, prawdopodobieństwo przeżycia zmniejsza się o 10% z każdą mijającą minutą – ludzki mózg może przetrwać bez tlenu tylko kilka minut.

Tylko dzięki masażowi serca tlen z krwioobiegu może dotrzeć do najważniejszych narządów.

Zalety LifePad®

Instrukcje krok po kroku dotyczące resuscytacji

Łatwy w użyciu, nie wymaga wcześniejszej wiedzy

Metronom i system wizualnej informacji zwrotnej

Dla optymalnej częstotliwości i głębokości uciśnień

Kompaktowy rozmiar

21 x 16 cm (format około A5), łatwy do schowania w każdej kieszeni

Elastyczny materiał

Dopasowuje się do kształtu ciała poszkodowanego

Łatwe pozycjonowanie

Instrukcje i oznaczenia znajdują się bezpośrednio na macie

LifePad®

pomoc w resuscytacji

Pierwsza pomoc - szybko i bezpiecznie!



Pieczątka firmowa

LIFE
PAD

Zostań aniołem stróżem!



LifePad®
Twoje wsparcie
w sytuacji kryzysowej



BĄDŹ
BOHATEREM
Zostań
aniołem stróżem!

SPOSÓB UŻYCIA

Instrukcje krok po kroku do resuscytacji:

1

**CONTROL
BREATHING**



Sprawdź przytomność
i oddech poszkodowanego

2

**EMERGENCY
CALL**




Wezwij pomoc
(zadzwoń na 999 lub 112)

3



Odsłoń klatkę piersiową
poszkodowanego

4

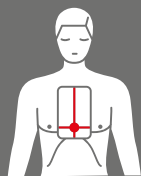

Umieść LifePad® zgodnie
z instrukcją

5

PUSH



Uciśnij klatkę piersiową
poszkodowanego

6

RELEASE



Zwolnij nacisk na klatkę
piersiową poszkodowanego

Powtórz kroki 5 i 6 w rytmie sygnału dźwiękowego
(sygnał dźwiękowy = naciśnięcie), aby zapewnić
częstotliwość 100 uciśnień na minutę.

Masaż serca wykonuje się do momentu pojawienia się wyraźnych
znaków życia lub przejęcia akcji ratunkowej przez lekarza
pogotowia ratunkowego.

CZY WIESZ,

że zatrzymanie akcji serca
często występuje w domu
lub w pracy?



Co czyni LifePad® wyjątkowym?


W sytuacji kryzysowej wielu ratowników może poczuć się przerażonych. LifePad® prowadzi Cię krok po kroku przez resuscytację, pomagając bezpiecznie wykonać odpowiednie działania.

System informacji zwrotnej: wizualnej i akustycznej

Instrukcje krok po kroku pomagają
zachować jasność umysłu.

Kolorowe diody LED zapewniają
wizualną informację zwrotną
na temat optymalnej siły ucisku.

Sygnał dźwiękowy wskazuje
optymalną częstotliwość ucisku
wynoszącą 100 uciśnień
na minutę.

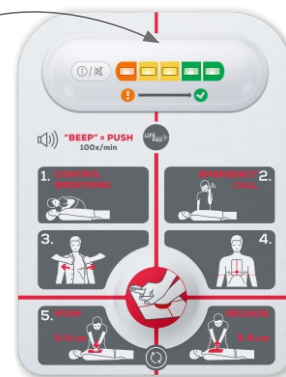

Nie wahaj się
- działaj!



NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIA

Łatwy w użyciu
i zawsze pod ręką

LIFE
PAD

W drodze



W czasie wolnym



Dzięki elastycznemu materiałowi LifePad® dopasowuje się do
każdego kształtu ciała. Powierzchnia kontaktowa pokazuje
dokładne miejsce ułożenia rąk do masażu serca.

Nie należy używać u osób w wieku poniżej 12 lat.

Urządzenie można również stosować razem z defibrylatorem
(sygnał dźwiękowy można wyłączyć).

W pracy

